



1020628 | P94

3bscientific.com

Entrenador de las fases del parto de 3B Scientific

ENTRENADOR DE LAS FASES DEL PARTO

Introducción

Ha adquirido un entrenador las fases del parto que le permitirá practicar y mostrar los procedimientos especializados de determinación de la fase del parto. El entrenador dispone de 6 piezas insertables aptas para la exploración por parte del estudiante y la valoración posterior. Esto permite practicar y mejorar las aptitudes en el marco profesional de la preparación al parto, tanto en la etapa de formación como en el día a día clínico.

Suministro

6 piezas insertables
 Placa de fijación con 4 tornillos
 (para su uso con el Simulador de parto P90)
 Lubricante
 Bolsa de transporte



Funciones

El conjunto se compone de 6 distintas piezas genitales insertables que representan distintos estadios de dilatación y permeabilidad de la cérvix. Las piezas se pueden emplear por separado o como módulos de ampliación del [Simulador de parto P90](#). Desde fuera resulta imposible distinguir cada pieza, aunque cuentan con un código numérico en la parte posterior gracias al cual se identifica en qué fase del parto se encuentra la cérvix de cada pieza.

<p>Pieza núm. 1</p>  <p>Cérvix cerrada (0,5 cm) Altura -2</p>	<p>Pieza núm. 2</p>  <p>Apertura cérvix 2 cm, altura -2</p>	<p>Pieza núm. 3</p>  <p>Apertura cérvix 3 cm, semipermeable; altura -2</p>
<p>Pieza núm. 4</p>  <p>Apertura cérvix 5 cm, permeable; altura -1</p>	<p>Pieza núm. 5</p>  <p>Apertura cérvix 7 cm, permeable, altura -1</p>	<p>Pieza núm. 6</p>  <p>Apertura cérvix 9 cm, permeable, altura 0.</p>

ENTRENADOR DE LAS FASES DEL PARTO

Montaje

Colocación de las piezas insertables de fase de parto:

- El uso combinado con el Simulador de parto P90 ([Basic](#) y [PRO](#)) requiere la inserción de las distintas piezas suministradas (1–6) en la estructura del simulador. Colocar los pies de goma del simulador de parto sobre una superficie antideslizante, p. ej. una mesa.
- Retire la pared abdominal.
- Retire la pieza de porción vaginal y el canal de parto (versión PRO).
- Desenrosque los 4 tornillos.
- Atornille la placa de fijación (Fig. 1) con los 4 tornillos integrados (presentes en la placa de fijación) (Fig. 2).

SOLAMENTE versión basic:

- Separe el cierre invisible trasero (sujeto a las clavijas blancas) de la pared abdominal (se seguirá empleando como cobertura en modo de funcionamiento normal para evitar que el lubricante penetre en la cavidad) (Fig. 3).
- Retire la pieza de vulva de la pared abdominal.
- Sujete la pared abdominal (solamente en la zona del coxis) (Fig. 4).
- Inserte la pieza de fase de parto deseada en la pelvis desde abajo (Fig. 5).
- Compruebe que la pieza insertable queda colocada correctamente en la estructura a través del cierre invisible.
- Cierre completamente la pared abdominal (Fig. 6).

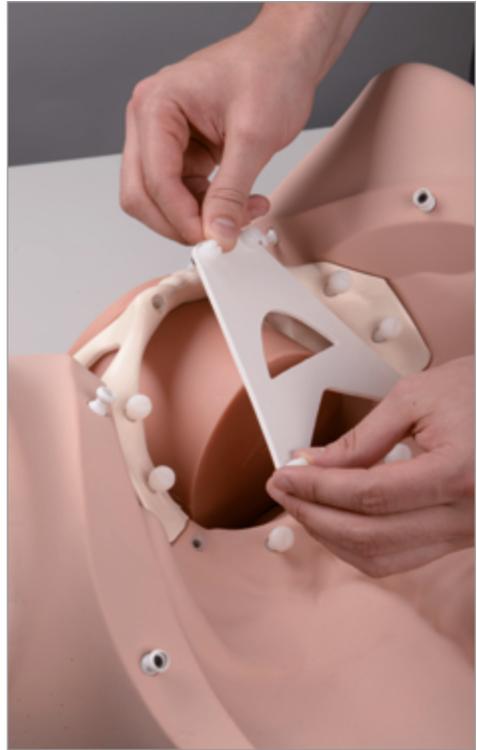


Fig. 1

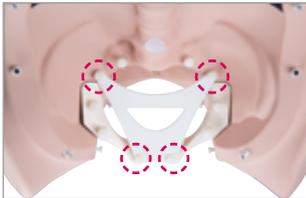


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



ENTRENADOR DE LAS FASES DEL PARTO

Limpieza y cuidado

Las superficies del entrenador se pueden limpiar con un paño húmedo o directamente bajo el agua corriente. Compruebe que todas las piezas están completamente secas antes del almacenaje.



CONSEJO

Los restos de lubricante en el simulador no suponen un problema siempre y cuando los intervalos entre usos no sean demasiado largos.

Comprobar siempre antes del uso que se ha aplicado suficiente lubricante.

Si prevé no emplear el simulador durante un periodo de tiempo prolongado, limpie previamente todas las piezas.

Especificaciones técnicas

Dimensiones:

Simulador (alto x ancho x largo): 13 x 11,5 x 13 cm

Bolsa (alto x ancho x largo): 25 x 60 x 23 cm

Peso aprox. 5,6 kg (bolsa de transporte incluida; 4,85 kg sin bolsa de transporte)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura de uso: de -10 °C a +60 °C

Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +60 °C

Lista de materiales consumibles:

[1020608 / XP90-015 Lubricante \(2 x 250 ml\)](#)

También recomendamos para la formación en asistencia al parto:

[1020332 | P90B Simulador de parto BASIC](#)

[1020333 | P90P Simulador de parto PRO](#)



3B Scientific GmbH • Customer Service Medical
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Alemania
Teléfono: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 del manual de instrucciones y el
diseño del producto: 3B Scientific GmbH, Alemania